


## Medicina polyurethan ernæringssonder med guidewire

Pakningen indeholder sonde, fikseringsplaster, pH teststrimmel og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende b.la. informationer om anlæggelse og sondens størrelse

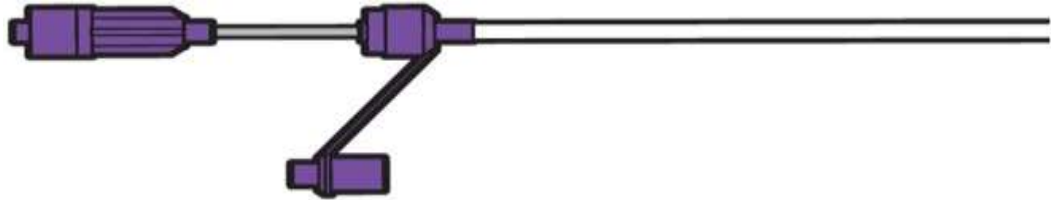

### Anvendelse.

Medicina polyurethan sonde med guidewire er velegnet til langtidsbrug ( bør skiftes efter 60 dage) til anlæggelse i ventriklen. Sonden er blød og udviklet til børn og voksne, som har brug for ernæring over en længere periode. Den leveres i 5 forskellige varianter (FR). Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH teststrimmel. KOM ALDRIG VAND I SONDEN/GUIDEWIREN inden korrekt placering er kontrolleret. Guidewiren må aldrig udskiftes eller genanlægges så længe sonden stadig befinder sig i patienten.

### Egenskaber.

- Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.
- Guidewiren har ENFit holder, som tillader aspiration inden guidewiren fjernes
- Guidewiren stopper minimum 2 cm inden de laterale huller, hvorved perforationsskade undgås
- Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller
- Afstandsmarkeringer (1 cm's afstand) til kontrol af sondens beliggenhed
- Er fuldt røntgenfast (40% Bariumsulfat ). Lyser tydeligt op ved røntgen
- Har ENFit kobling
- Størrelserne 8FR og 10FR findes tillige med tungsten

### Sortiment.

<b>4050004</b>	<b>6FR x 55 cm (25)</b>	<b>4050002</b>	<b>10FR x 85 cm (25)</b>
<b>4050005</b>	<b>6FR x 75 cm (25)</b>	<b>4050001</b>	<b>10FR x 120 cm (25)</b>
<b>4050006</b>	<b>6FR x 85 cm (25)</b>	<b>4050003</b>	<b>12FR x 120 cm (25)</b>
<b>4050008</b>	<b>8FR x 55 cm (25)</b>		
<b>4050009</b>	<b>8FR x 75 cm (25)</b>		
<b>4050001</b>	<b>8FR x 85 cm (25)</b>		
<b>4050007</b>	<b>8FR x 120 cm (25)</b>		